



CE
0499

AGULHA GENGIVAL UNOJECT
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL
Português

SOMENTE PARA USO PROFSSIONAL

- Agulhas trifacetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica.
- Lacsres por solda à fusão e protetores super seguros.
- Apirogénicas.
- Esterilizadas por óxido de etileno.

Composição: Confeccionadas em aço especial inoxidável de alta tecnologia. Siliconizadas para suavizar a penetração da cânula no tecido.

Indicações: Para aplicação de anestésicos injetáveis, segundo as técnicas preconizadas para este tamanho de agulha.

- Apresentações:** Caixa com 100 agulhas esterilizadas descartáveis (Tamanho 30 G Curta).
Caixa com 100 agulhas esterilizadas descartáveis (Tamanho 30 G Xcurta).
Caixa com 100 agulhas esterilizadas descartáveis (Tamanho 27 G Longa).

PRODUTO ESTÉRIL.

O LACRE GARANTE A ESTERILIDADE DA AGULHA.

AS AGULHAS SÃO DE USO ÚNICO, DEVENDO SER DESCARTADAS APÓS O USO.


Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco.

Prazo de Validade: 5 anos.

Advertências e Precauções:

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
 - Não usar a agulha se o lacre estiver rompido.
 - Durante a aplicação, não mudar a direção da agulha enquanto a mesma ainda estiver no tecido.
 - Nunca forçar a agulha ao encontrar resistência.
 - As agulhas devem ser descartadas e destruídas imediatamente após o uso, para prevenir danos ou reutilização por pessoas não autorizadas.
- Não descartar, sem antes isolar a agulha com a cápsula. Descartar preferencialmente, em recipientes especiais para materiais contaminados.
- Uma vez usadas, as agulhas não devem ser reesterilizadas ou reutilizadas.
 - Este produto deve ser usado somente por dentista profissional e para as aplicações descritas nas Instruções de Uso do mesmo.

Modo de Usar: Gire as extremidades da cápsula até que o lacre se rompa. Não utilize se o lacre já estiver violado. Remova a capa menor. Rosqueie a agulha na seringa e retire a proteção.

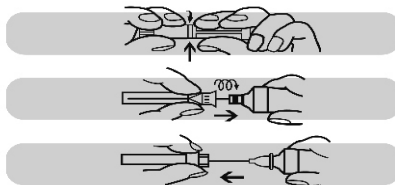

CE
0499

AGULHA GENGIVAL UNOJECT
AGUJA DESECHABLE PARA INYECCIÓN EN TEJIDO GINGIVAL
Español

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFSSIONAL

- Agujas trifacetadas con indicación de la faceta del bisel y paredes finas, que permiten que la solución anestésica fluya mejor.
- Lacsres por soldadura a fusión y protectores altamente seguros.
- Apirogénicas.
- Esterilizadas con óxido de etileno.

Composición: Fabricadas con acero inoxidable especial de alta tecnología. Siliconadas para suavizar la penetración de la cânula en los tejidos.

Indicaciones: Para aplicación de anestésicos inyectables siguiendo las técnicas preconizadas para este tamaño de aguja.

- Presentación:** Caja con 100 agujas esterilizadas desechables (Tamaño 30 G Corta).
Caja con 100 agujas esterilizadas desechables (Tamaño 30 G Xcorta).
Caja con 100 agujas esterilizadas desechables (Tamaño 27 G Larga).

PRODUCTO ESTÉRIL

EL LACRE GARANTIZA LA ESTERILIDAD DE LA AGUJA.

LAS AGUJAS SON DE UN SOLO USO Y SE DEBEN DESECHAR DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN

Almacenamiento y Conservación: conservar el producto en su envase original bien cerrado y en un lugar seco.


Validez: 5 años.

Advertencias y Precauciones:

- No utilizar el producto si el envase se encuentra dañado, abierto o húmedo.
- No usar la aguja si el lacre está roto.
- Evitar la deflexión o cambio de dirección de la aguja cuando está en el tejido.
- Si se encuentra resistencia no se debe forzar la aguja.

- Las agujas se deben desechar y destruir inmediatamente después de su utilización para evitar que sean usadas por personas no autorizadas. Antes de ser desechadas las agujas se deben separar junto con la cápsula; de preferencia, se las debe disponer en recipientes especiales para materiales contaminados.
- Las agujas usadas no se pueden esterilizar ni utilizar nuevamente.
- Este producto sólo puede ser usado por un dentista y para las aplicaciones descritas en las Instrucciones de Uso.

Modo de Usar: Gire las extremidades de la cápsula hasta que se rompa el lacre. No use el producto si el lacre está roto. Retire la tapa menor; rosquee la aguja en la jeringa y retire la protección.

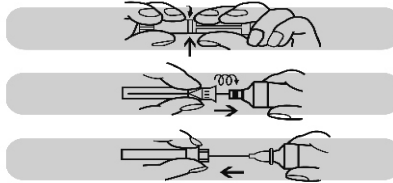

CE
0499

AGULHA GENGIVAL UNOJECT
Disposable gingival needle
Inglés

PROFESSIONAL USE ONLY

- Trifaceted needles with the bevel face indicated and thin walls which provide improved flow of the anesthetic solution.
- Sealed by melting weld and super safe protectors.
- Non pyrogenic.
- Sterilized by ethylene oxide.

Composition: Made of special high technology stainless steel, they are siliconized to soften the penetration of the cannula into tissues.

Indications: For injection of anesthetics, according to the techniques advocated for these needle sizes.

Presentations: Box containing 100 sterilized disposable needles (Size: 30 G Short).
Box containing 100 sterilized disposable needles (Size: 30 G Xshort).
Box containing 100 sterilized disposable needles (Size: 27 G Long).

STERILE PRODUCT.

THE SEAL GUARANTEES THE STERILITY OF THE NEEDLE.

THE NEEDLES ARE INTENDED FOR SINGLE USE AND SHOULD BE DISPOSED AFTER USE.


Storage and Conservation: Keep the product in its original well closed package and store in a dry place.

Shelf-life: 5 years.

Warnings and Precautions:

- Do not use if package is damaged, open or wet.
 - Do not use if seal is broken.
 - During use, do not change needle direction while it is inside tissue.
 - Never force the needle if there is any resistance.
 - The needles should be disposed and destroyed immediately after use to avoid injuries or reuse by non authorized people.
- Do not dispose without first isolate the needle with the cartridge case. Dispose preferably in special containers aimed for contaminated materials.
- Since they are used, needles should not be re-sterilized or reused.
 - This product should be used by dentists only and just for the purposes described in these Instructions for Use.

Way to use: Rotate the edges of the cartridge case until the seal is broken. Do not use product if the seal is already broken. Remove the smaller cap. Screw the needle on the syringe and remove the protection.

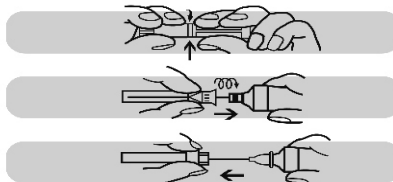

Fabricado por:

DFL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Estrada do Guerengué, 2059
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Cep: 22713-002

CNPJ: 33.112.665/0001-46
Indústria Brasileira/ Indústria Brasileira/Made in Brazil
Tel.: 55-21-2445-6766 - Fax: 55-21-3342-4009

www.dfl.com.br - sac@dfl.com.br

Farmacêutico Responsável/ Farmacêutico Responsable/Pharmacist in Charge:

Dr. Evaldo R. de Oliveira - CRF-RJ Nº 2897



Helene Marie Therese Dobbin - Rua dos Pioneiros, 1485 - Fernão Ferro Portugal - 2865 - 82
ANVISA Nº: 10017710035